



# ISTRUZIONI INSERIMENTO RISULTATI RING TEST TERRENI

## 1. ACCESSO AL SITO E FUNZIONALITA'

Per accedere al sito da utilizzare per l'inserimento dei risultati delle analisi, si utilizza il link


<https://www.silpalab.it/ringtest/login.php>

e si inseriscono username e password forniti in fase di iscrizione al circuito.

Se si parte dal sito dell'Associazione

<https://silpalab.it/>

basterà cliccare sulla voce "RING TEST" e quindi su quella "Inserimento risultati"

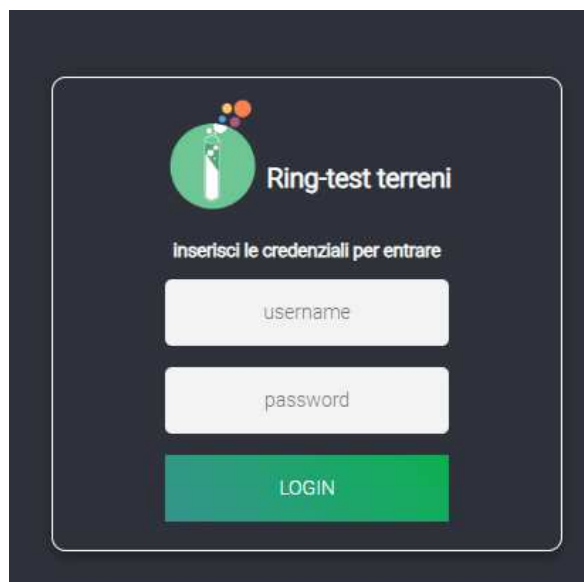

In questo modo si viene indirizzati nella Home page dell'applicativo di inserimento

**Ring Test Terreni v1.0**

1 campione da inserire

Home

Modifica password

Tecniche analitiche

Logout

user: [12] Regione Piemonte Settore Fitosanitario Laboratorio Agrochimico Ceva

● ring aperto ○ ring chiuso

Campione	Operazione	dati inseriti	z-score
999 / 2024 / prova	modifica visualizza	● Scarica (PDF)	
5 / 2024 / ORMEA (CN)	inserisci visualizza	● Scarica (PDF)	
4 / 2024 / PRATO GRANDE (BO)	modifica visualizza	● Scarica (PDF)	
3 / 2024 / BROILO (TN)	visualizza	○ Scarica (PDF)	<a href="#">scarica documento</a>
2 / 2024 / Senza nome	visualizza	○ Scarica (PDF)	<a href="#">scarica documento</a>
1 / 2024 / Fiume Veneto (UD)	visualizza	○ Scarica (PDF)	<a href="#">scarica documento</a>
8 / 2023 / ARZENE	visualizza	○ Scarica (PDF)	
7 / 2023 / VIOLA	visualizza	○ Scarica (PDF)	
6 / 2023 / CAMERANA	visualizza	○ Scarica (PDF)	
5 / 2023 / MINOPRIO	visualizza	○ Scarica (PDF)	
4 / 2023 / RONZO-CHIENIS	visualizza	○ Scarica (PDF)	

Nel riquadro di navigazione (a sinistra) sono presenti le seguenti funzioni:



**Home:** ritorno alla Homepage

**Modifica password:** permette all'utente di cambiare la sua password di accesso

**Tecniche analitiche:** permette all'utente di impostare per ogni parametro la sua tecnica analitica di default, in modo tale da non doverla selezionare ogni volta che inserisce i propri dati di un ring test

**Logout:** permette di uscire dall'applicazione

Nel  **riquadro di contenuto** (al centro) è presente invece l'elenco dei ring-test finora creati dall'utente amministratore; per ogni campione, nella colonna "Operazione" sono presenti diverse funzioni:

**Inserisci:** permette di inserire per ogni parametro i propri risultati e impostare le tecniche analitiche o sostituire quelle già inserite con l'apposito pulsante sovrascrivendole a quelle eventualmente già inserite. Questo pulsante rimane attivo fino a quando non viene inserito e salvato un primo set di dati.

**Modifica:** (questa possibilità compare solo dopo aver inserito e salvato un primo set di dati e rimane attiva fino a quando il ring-test non viene chiuso) permette di modificare i dati di uno specifico ring-test inseriti da un utente laboratorio; questa possibilità rimane attiva fino a quando il ring-test non viene chiuso.

**Visualizza:** permette di visualizzare i dati inseriti di uno specifico ring-test da un'utente laboratorio

**Dati Inseriti:** permette di scaricare in un modulo riassuntivo i dati inseriti dal laboratorio per quello specifico ring-test

**Z-score:** permette di scaricare l'elaborazione dei risultati di quello specifico ring-test. **Tale elaborazione è disponibile solo nel caso in cui l'utente laboratorio abbia partecipato attivamente inviando i propri dati, a quel ring-test.** Questo pulsante si attiva solo dopo che l'organizzazione ha chiuso la possibilità di inserire/modificare i dati ed ha eseguito le dovute elaborazioni.

infine viene segnalato lo **stato dei ring-test** con un cerchietto giallo se per il campione specifico è ancora possibile inserire/modificare dati o grigio nel caso in cui l'organizzazione ha chiuso la possibilità di inserire i dati e sta procedendo all'elaborazione/emissione dei risultati.

## 2. ISTRUZIONI CARICAMENTO DATI

Individuare nel riquadro di navigazione il pulsante "tecniche analitiche" e inserire/verificare/modificare le tecniche analitiche utilizzate per la determinazione dei vari parametri che verranno poi codificate secondo la TAB 1 e riportati negli elaborati di restituzione dati.

Questa operazione va effettuata la prima volta che si inseriscono risultati o quando si modificano le tecniche analitiche che vengono ripresentate automaticamente negli inserimenti successivi. In ogni caso è possibile modificare le tecniche anche in fase di inserimento risultati.

La scelta di riportare alcune indicazioni sul metodo utilizzato per la determinazione dei valori è stata fatta per permettere ai vari partecipanti di confrontare i propri dati con quelli forniti da laboratori che utilizzano un'analogia tecnica analitica.



Tornare nella “Home” attraverso l’apposito tasto e attivare lo schema di inserimento attraverso il tasto “Inserisci” corrispondente al campione interessato.

Premesso che la restituzione dei dati all’organizzazione rappresenta il momento cruciale che più influenza la rappresentatività del dato ottenuto dall’elaborazione, si prega di prestare particolare attenzione alle indicazioni che seguono.

Lo schema di inserimento, per ciascun parametro, riporta l’unità di misura richiesta e suggerisce il numero di cifre, decimali o significative, da inserire secondo quanto riassunto nella TAB 2.

Possono essere elaborati solo dati numerici, per cui i risultati inseriti nelle forme:

< (minore di)

“non rilevabile/determinabile”, nr o altre sigle analoghe

0 (zero)

vengono accettati ma non considerati nell’elaborazione dei dati nemmeno come dato restituito per la scelta del tipo di elaborazione (vedi punto 7 “RING TEST TERRENI SILPA”).

I campi relativi a parametri non determinati vanno semplicemente non compilati

Una volta inseriti i dati, cliccare sulla barra grigia “INVIA” presente a fondo schema, se il sistema rileva errori di compilazione (essenzialmente legati al numero di cifre decimali inserite) restituisce una serie di errori, dopo averli corretti occorre cliccare nuovamente la barra “INVIA” finché il sistema non passa nella schermata successiva in cui vengono riportati i soli parametri di cui si restituisce un valore, a questo punto si controllano i dati inseriti e, se sono corretti, si clicca su “Conferma e Registra”.

A questo punto è possibile farsi una stampata dei dati inseriti attraverso il pulsante “scarica (pdf)” nella colonna “dati inseriti”

Fino a quando l’organizzazione non chiude la possibilità per procedere all’elaborazione (quindi finché il cerchietto relativo allo stato è giallo), è sempre possibile inserire nuovi dati o modificare quelli inseriti utilizzando il tasto “modifica” che compare nella home in corrispondenza dei vari campioni.